

ARK™ *Levetiracetam Control*

Este folheto informativo da ARK Diagnostics, Inc. para o controlo do Levetiracetam ARK deve ser lido atentamente antes da utilização. Devem seguir-se as instruções contidas no folheto informativo. A fiabilidade dos resultados do ensaio não pode ser garantida se houver quaisquer desvios das instruções contidas neste folheto informativo.

Serviço de atendimento ao cliente







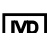





ARK Diagnostics, Inc.
 48089 Fremont Blvd
 Fremont, CA 94538 USA
 Tel: 1-877-869-2320
 Fax: 1-510-270-6298
 customersupport@ark-tdm.com
 www.ark-tdm.com



Emergo Europe
 Prinsessegracht 20
 2514 AP Haia
 Países Baixos

Símbolos utilizados

| | | | |
|---|--|---|-------------------------------|
|  | Código do lote |  AAAA-MM-DD | Consumir até/Data de validade |
|  | Número do catálogo |  | Fabricante |
|  | Representante autorizado |  | Marca CE |
|  | Dispositivo médico de diagnóstico in vitro |  | Limite de temperatura |
|  | Consulte as instruções de utilização |  | Controlo da Qualidade |
| Rx Only | Requer prescrição médica | | |

1 Nome

ARKTM Levetiracetam Control

2 Utilização prevista

O controlo do Levetiracetam ARK é indicado para ser usado no controlo da qualidade do ensaio de Levetiracetam ARK, **REF** 5024-0001-00.

3 Conteúdo

O controlo do Levetiracetam ARK compreende uma matriz de proteína sintética com as seguintes concentrações de levetiracetam:

| REF | Descrição do produto | Quantidade/Volume |
|--------------|--|-------------------------|
| 5024-0003-00 | ARKTM Levetiracetam Control Levetiracetam, tampão, seroalbumina bovina e conservantes (nível nominal) | Frascos com conta-gotas |
| | BAIXO (7,5 µg/mL) | 1 X 4 mL |
| | MÉD (30,0 µg/mL) | 1 X 4 mL |
| | ALTO (75,0 µg/mL) | 1 X 4 mL |

Cada laboratório deve estabelecer as suas próprias gamas para cada lote novo de ensaios.

4 Advertências e precauções

- Para utilização de **diagnóstico *In Vitro***.
- Não misture os reagentes de números de lote diferentes.
- Utilize cada lote como um conjunto.

5 Instruções de utilização

- Para um resumo completo e explicação do ensaio do levetiracetam, consulte o folheto informativo relativo ao Ensaio do Levetiracetam ARK.
- Os reagentes estão prontos para a utilização. Inverta cada nível suavemente antes de dosar.
- Aplique volume suficiente (~40µL/gota) em copos de amostra individuais para cada nível. Consulte os requisitos de volume de amostra específicos para o instrumento. Recoloque as tampas em seus recipientes originais e mantenha-os fechados.
- Armazene a 2-8°C. Utilize antes da data de expiração.

6 Limitações do procedimento

Resultados precisos e reproduzíveis dependem de instrumentos que funcionem apropriadamente, de reagentes, calibradores, controlos e armazenagem dos produtos conforme instruído e as boas práticas de laboratório.

7 Marcas registadas

ARK[™] é marca registada da **ARK** Diagnostics, Inc.

Outras marcas e nomes de produtos são marcas registadas dos seus respetivos proprietários.



ARK Diagnostics, Inc.
Fremont, CA 94538 USA

Impresso nos EUA
Revisão em Fevereiro de 2017
1600-0171-00PT Rev 03