


**ARK™ Levetiracetam Calibrator**





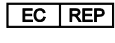




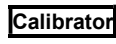
Il est impératif de lire attentivement la présente notice ARK Diagnostics, Inc. relative au produit ARK Levetiracetam Calibrator avant toute utilisation. Les instructions de cette notice doivent être suivies scrupuleusement. La fiabilité des résultats du dosage ne peut pas être garantie en cas de non-respect de ces instructions.

**Service clientèle**

**ARK Diagnostics, Inc.**  
 48089 Fremont Blvd  
 Fremont, CA 94538 États-Unis  
 Tél. : 1-877-869-2320  
 Fax : 1-510-270-6298  
 customersupport@ark-tdm.com  
 www.ark-tdm.com


 Emergo Europe  
 Westervoortsedijk 60  
 6827 AT Arnhem  
 Pays-Bas


 MedEnvoy Switzerland  
 Gotthardstrasse 28  
 6302 Zoug  
 Suisse

**Légende des symboles utilisés**

	Code de lot	 JJ/MM/A AAA	Utiliser avant le/Date d'expiration
	Référence catalogue		Fabricant
	Représentant autorisé		Label CE
	Dispositif médical de diagnostic in vitro		Limite de température
	Consulter les instructions d'utilisation		Calibrateur
<b>Rx Only</b>	Pour utilisation sur prescription uniquement		

## 1 Dénomination

ARK<sup>TM</sup> *Levetiracetam Calibrator*

## 2 Utilisation prévue

ARK Levetiracetam Calibrator est destiné à l'étalonnage du système de dosage ARK Levetiracetam Assay, RÉF. 5024-0001-00.

## 3 Contenu

ARK Levetiracetam Calibrator se compose d'une matrice protéique synthétique présentant les concentrations en lévétiracétam suivantes :

RÉF.	Description du produit	Quantité/Volume	
5024-0002-00	<b>Calibrateurs ARK Levetiracetam</b> Lévétiracétam, tampon, albumine de sérum bovin et conservateurs	Flacons compte-gouttes	
	<b>A</b>	0,0 µg/ml	1 x 4 ml
	<b>B</b>	5,0 µg/ml	1 x 2 ml
	<b>C</b>	12,5 µg/ml	1 x 2 ml
	<b>D</b>	25,0 µg/ml	1 x 2 ml
	<b>E</b>	50,0 µg/ml	1 x 2 ml
	<b>F</b>	100,0 µg/ml	1 x 2 ml

## 4 Normalisation

Il n'existe aucune norme internationalement reconnue pour le lévétiracétam. Les calibrateurs ARK Levetiracetam Calibrator sont préparés par dilution gravimétrique d'une solution de lévétiracétam haute pureté dans une matrice protéique synthétique exempte de lévétiracétam.

## 5 Avertissements et précautions

- Pour un usage **diagnostic *in vitro***.
- Ne pas mélanger des calibrateurs provenant de numéros de lot différents.
- Utiliser chaque lot comme un ensemble.

## 6 Instructions d'utilisation

- Pour un résumé complet et une explication du système de dosage de lévétiracétam, consulter la notice relative au produit ARK Levetiracetam Assay.

- Les calibrateurs sont prêts à l'emploi. Mélanger chaque niveau en inversant délicatement avant toute utilisation.
- Verser un volume suffisant (~40 µl/goutte) dans des gobelets de prélèvement individuels pour chaque niveau. Consulter les exigences en termes de volumes de prélèvement spécifiques à l'instrument. Replacer les capuchons sur leurs récipients d'origine et les serrer.
- Stocker à une température comprise entre 2 et 8 °C. Utiliser avant la date d'expiration.

## 7 Procédure

### Étalonnage

Effectuer une procédure d'étalonnage complète (6 points) ; calibrateurs de test en double. Vérifier la courbe d'étalonnage sur au moins deux niveaux de contrôle qualité conformément au plan d'assurance qualité de laboratoire établi.

### Quand procéder au réétalonnage

- Chaque fois qu'un nouveau numéro de lot de réactifs est utilisé
- Chaque fois que les résultats de contrôle qualité l'exigent
- Chaque fois que les protocoles de laboratoire standard l'exigent

## 8 Limites de la procédure

La précision et la reproductibilité des résultats reposent sur le fonctionnement correct des instruments, les réactifs, les calibrateurs, les contrôles, le stockage des produits selon les instructions et de bonnes techniques de laboratoire.

## 9 Marques commerciales

**ARK**<sup>TM</sup> est une marque commerciale de **ARK** Diagnostics, Inc. Tous les autres noms de marque ou de produit sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.



**ARK Diagnostics, Inc.**  
Fremont, CA 94538 États-Unis

Révision : novembre 2023  
1600-0170-00FR Rév. 05